

COMEN

COMEN Поделись с миром



BQ20


Открыто-реанимационная система

+7 (812) 467 87 45
info@comen-shop.ru
comen-shop.ru



BQ20, малогабаритный, интегрированный с ТермалКуб (ThermalCube™)

Лучшая открыто-реанимационная система высочайшего качества, обеспечивающая оптимальную эффективность обогрева и исключительную практичность благодаря эксклюзивному обогревателю премиум-класса ТермалКуб (ThermalCube™).

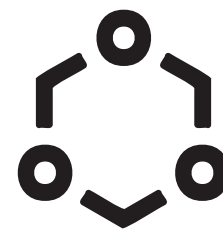

Футуристическая Конструкция




Высококачественные материалы

- ✓ Три режима управления: предварительный нагрев за 4 минуты.
- ✓ Низкий уровень шума в работе < 45 дБм.
- ✓ Низкое энергопотребление
- ✓ Высокая однородность температуры




Отражатель исключительного вида

Гиперболоид

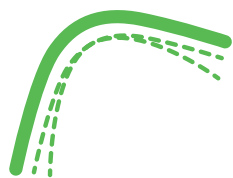

Способствуют эффективному равномерному нагреву

Бесшовный

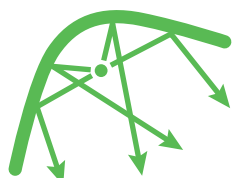


Увеличенная поверхность отражения света повышает эффективность

АЛАНОД (ALANOD*)




Эффективное отражение до 98% света благодаря улучшенным свойствам.


Сравнение с другими принципиальными конструкциями

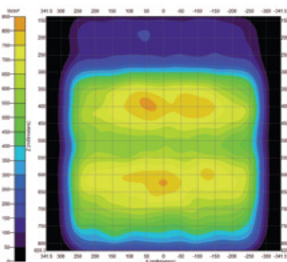

Параболоид

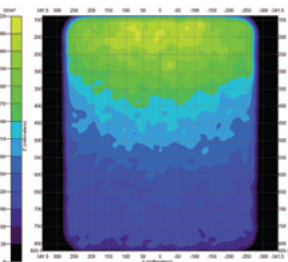

Гиперболоид со складкой

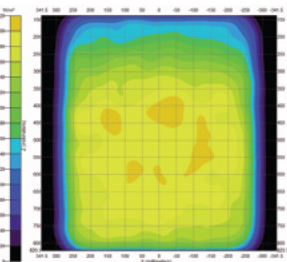

"КОМЕН" (COMEN)
Бесшовный Гиперболоид


Высокопрочная нагревательная трубка

Картриджная структурная нагревательная трубка, способная быстро генерировать тепло с более длительным сроком службы.

Керамическое покрытие

- Предотвращение окисления
- Фильтрация вредных волн околоинфракрасного спектра

Картриджный нагреватель

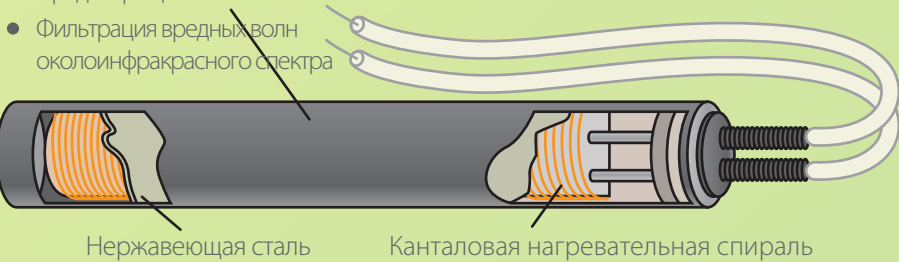

Нержавеющая сталь

Канталовая нагревательная спираль

Импортные материалы: АЛАНОД (ALANOD) из Германии, Кантал из Швеции.

Компактная наклонная лампа

Умный дизайн для лучшей работы.

- Применим в компактном пространстве отделения интенсивной терапии/родильного зала (остается больше места для размещения хирургического светильника, подвесов и т. д.)
- Увеличенное пространство для медицинского персонала и проведения реанимационных, операционных мероприятий и ежедневного ухода.




Безопасность

- Защита от ожогов медицинского персонала
- Двойная защита новорожденных



ХитКаст (HeatCast™)

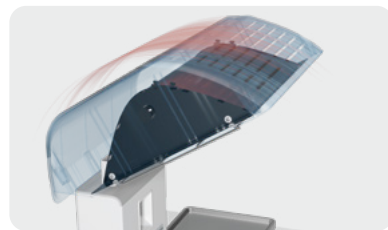

Запатентованная "Комен" (Comen) конструкция теплопередачи равномерно распределяет нагретый воздух.

СейфШилд (SafeShield™)



Дублированная система обеспечивает аварийную поддержку во время нештатных ситуаций.

Только "Комен" (Comen)

АПГАР (APGAR) и таймер

Напоминание и ведение учета времени для клинического последового обследования

Светильник для проведения осмотра

Прямое освещение определенных областей во время диагностики и обследования

Наклон

Наклонная в обе стороны кроватка с пузырьковым индикатором уровня

Откидная дверца

Складные бесшумные прозрачные боковые панели для легкого доступа к новорожденным.

Матрас

Губчатый матрас/гелевый матрас, противопротезный и биосовместимый.

Стойка для внутривенных вливаний, лоток для рентгенологических исследований

Размещение инфузионного оборудования, кассет с рентгеновской пленкой и других медицинских принадлежностей.

Двухроликовая ножка

Высокая надежность и стабильность, без разрушающего воздействия на покрытие пола.

Выдвижной ящик

Функциональный ящик для хранения медицинских принадлежностей.