


Многофункциональный и надежный

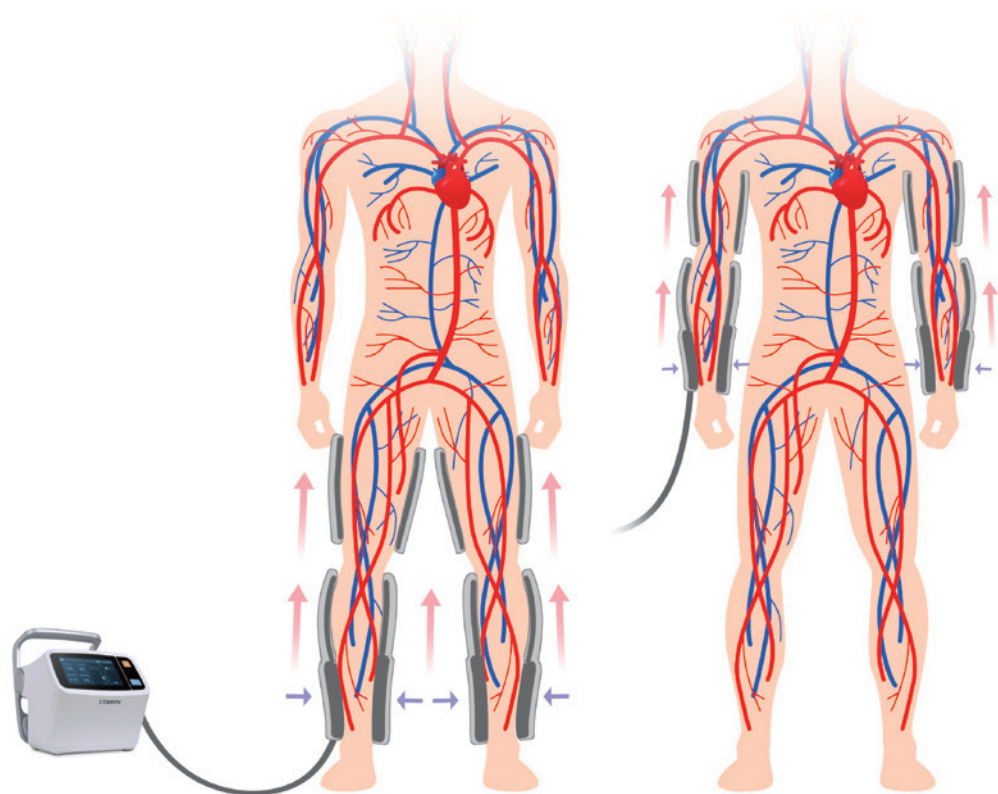

Тип аксессуара	Срок службы	Материалы	Рабочие части
Одноразовый	5000 раз	Медицинский нетканый материал и TPU	ступни, ноги, предплечья, руки
Многоразовый	50 000 раз	Медицинская оксфордская ткань и TPU	ступни, ноги, предплечья, руки

Комфортные и надежные аксессуары

- Многоразовые манжеты можно надувать 50 000 раз, а одноразовые — 5000 раз, что обеспечивает длительный срок службы и снижает медицинские расходы.
- Подкладка манжет выполнена из медицинского нетканого материала, который отличается повышенной воздухопроницаемостью и комфортом.
- Материал TPU медицинского класса подходит для всех сезонов и очень удобен для пациентов.
- Удлинительная трубка с антистатической обработкой эффективно снижает поглощение пыли и волос, а также легко чистится.

+7 (812) 467 87 45
info@comen-shop.ru
comen-shop.ru

COMEN



SCD 600 Система пневматической компрессии

для предотвращения тромбоза глубоких вен и
тромбоэмболии легочной артерии

Мощное и интеллектуальное устройство



Персонализированное лечение пациентов

12 стандартных режимов терапии (градиентное сжатие с прерывистым пульсом и пневматическое сжатие) и 8 настраиваемых режимов терапии для удовлетворения потребностей различных пациентов.




Интеллектуальное сжатие, динамическое и визуализированное лечение

- Устройство позволяет пропустить травмированную область для упрощения работы врача и обеспечения комфорта пациента.
- Регулируемое давление и время.
- Отображение информации в реальном времени позволяет отслеживать изменение давления и накачивание манжет во время терапии, чтобы контролировать общую ситуацию.

Точное и надежное устройство

- Динамический алгоритм PID с автоматической адаптацией позволяет автоматически корректировать давление, обеспечивая стабильность давления и непрерывно поддерживая оптимальные показатели для защиты безопасности пациента. Линия накачивания оснащена односторонней вентиляцией, что гарантирует точный контроль давления с погрешностью $\leq \pm 5$ мм рт. ст.
- Двойной датчик давления медицинского класса позволяет в реальном времени получать показатели давления и обеспечивает двойную защиту от превышения давления для безопасности пациента.
- Двухъядерный процессор обеспечивает мониторинг всего процесса терапии в реальном времени для безопасного и эффективного лечения.

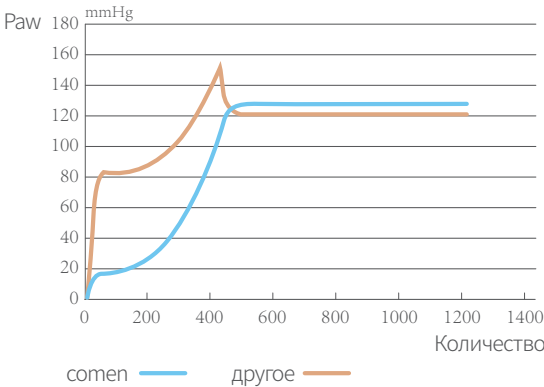

Показания к применению

- Предотвращение ТГВ и ТЛА
- Быстрое устранение отечности
- Улучшение потока артериальной крови

Легкое и удобное устройство

Гибкий и эффективный рабочий процесс

SCD600 обладает компактным корпусом и уникальным зажимом для удобного и простого управления. Это повышает гибкость и комфорт как для врачей, так и для пациентов.



4,3-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с четким отображением



Тележка с бесшумными роликами и ящиком для хранения аксессуаров для удобного перемещения




Уникальная конструкция зажима позволяет фиксировать устройство в различных позициях

Клиническое использование


Последовательное накачивание, расширение, сжатие многокамерных манжет и выпускание воздуха из них приводит к одновременному увеличению циркулярной компрессии ноги и ступни. Это не только улучшает скорость кровообращения, устраняет тромбы за створками венозного клапана, предотвращает застой крови, улучшает циркуляцию крови, межклеточной жидкости, предотвращает накопление факторов свертывания крови и присоединение к внутренней оболочке сосудов, но также усиливает активность фибринолитической системы и вызывает изменения в гемодинамической и фибринолитической системах, что позволяет не допустить тромбоз глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболию лёгочной артерии (ТЭЛА)



Сжатие

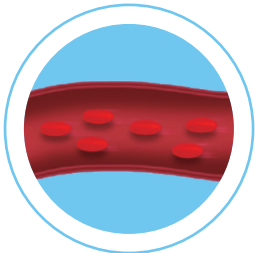

Улучшение кровообращения

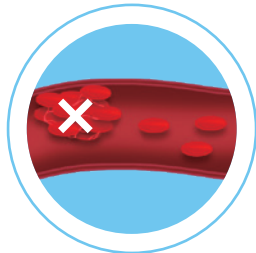

Предотвращение накопления факторов свертывания крови

Отделения



Акушерско-гинекологическое отделение



Ортопедическое отделение



Отделение интенсивной терапии



Отделение неотложной помощи



Отделение реабилитационной терапии



Отделение гериатрии



Отделение эндокринологии



Отделение гематологии



Сердечно-сосудистая медицина



Сосудистая хирургия



Кардиоторакальная хирургия



Онкологическое отделение



Отделение общей хирургии



Отделение респираторной медицины



Нефрологическое отделение



Неврологическое отделение



Нейрохирургическое отделение



Другие отделения