

Стремление к безопасности во время инфузии

- **Датчики динамического давления (DPS)**

Благодаря отображению изменений давления в трубопроводе в режиме реального времени лица, осуществляющие уход, могут прогнозировать риск путем раннего предупреждения об обструкции, чтобы обеспечить безопасность инъекций препаратов.

- **Автоматический сброс давления (Анти-болюс)**

Когда трубопровод блокируется и срабатывает сигнал тревоги, давление в трубопроводе автоматически сбрасывается, чтобы избежать неожиданного поступления болюса к пациенту.



Взаимосвязи расширяют возможности воображения


Поддержка проводного/Wi-Fi подключения для обеспечения стабильной передачи клинической информации.
Доступ к инфузионной рабочей станции MX8900.
Доступ к HIS/CIS/EMR по протоколу HL7.



M800 Шприцевой насос

Детальный дизайн, улучшенное удобство


Последнее мастерство IML не оставляет щелей между панелью экрана и корпусом, предотвращая попадание жидкостей.

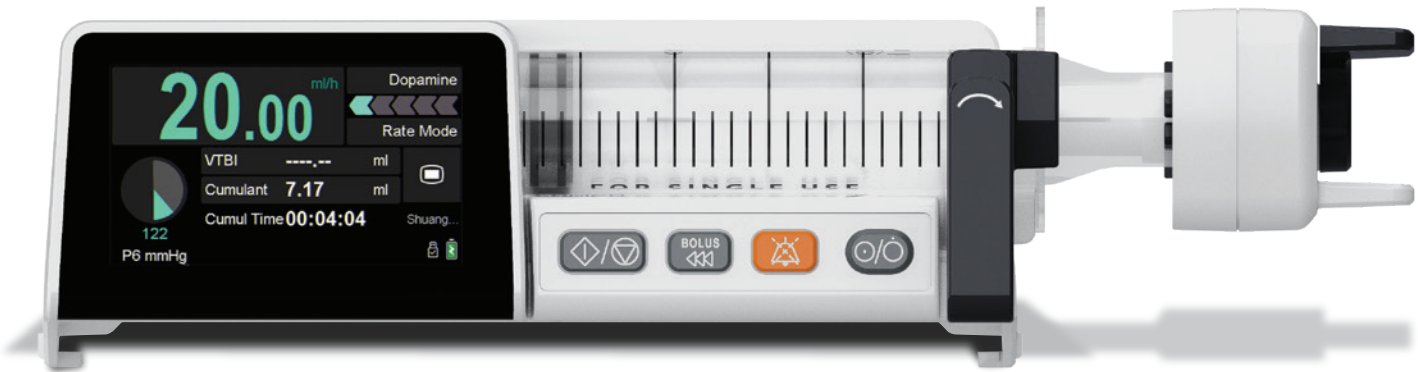

Исключительное мастерство
Бесшовное соединение деталей, повышенная защита от проникновения жидкости



Система автоматического затемнения
Обеспечивает правильную яркость экрана все время

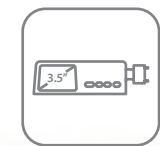

3,5-дюймовый сенсорный экран
Приносит легкий опыт пользователю



Автоматическая идентификация шприцев
Поддержка 2мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 30 мл, 50мл/60мл шприц

Более сильная комбинация, гибкая транспортировка

Меньше, легче и с уникальной конструкцией ручки для различных транспортных задач.
Модульная конструкция обеспечивает максимальную гибкость комбинирования для различных сценариев инфузии.



COMEN 01



Точная инъекция


Высокопроизводительные двигатели и процессоры обеспечивают долговременную точность инфузии и стабильность скорости потока.



Калибровка точности $\pm 1.8\%$

Различные режимы инъекции

- М800 предназначен для отличного удовлетворения потребности пациентов, нуждающихся в микроинъекциях широкого спектра лекарств. М800 облегчит работу медсестер, предлагая на выбор до 9 уникальных режимов инъекций.

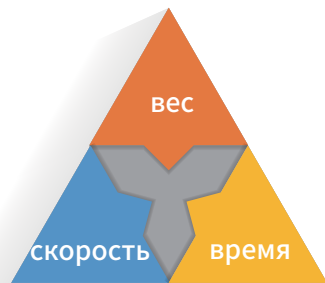

Intelli.TM Plan (Интеллектуальный план)

- В комплект поставки Comen M800 входит библиотека препаратов, в которой может храниться до 5000 препаратов, что позволяет лицам, осуществляющим уход, гибко настраивать параметры препаратов для использования в различных планах лечения.
- Часто используемые планы лечения можно сохранить для использования в будущем в различных клинических ситуациях. Всего несколькими касаниями М800 автоматически загрузит любые ранее сохраненные параметры инфузии на основе плана лечения, повысив эффективность работы и обеспечив лицам, осуществляющим уход, удобство и простоту, в которых они всегда нуждались.

Add	Delete	Treatment Plan
Treatment Plan 1--Atorvastatin--Rate Mode		1/2
Treatment Plan 2--Adrenaline--Time Mode		
Treatment Plan 3--Atorvastatin--Rate Mode		
Treatment Plan 4--Verapamil--Time Mode		

Drug	Atorvastatin	Rate Mode
Rate	200.00	ml/h
VTBI	100.00	ml
Time	00:30:00	h:m:s
	Save Treat.	

COMEN 02