


Первоклассный опыт, который вам необходим




- **8-дюймовый** емкостный сенсорный монитор, отличающийся ультразвуковой рамкой и высокой чувствительностью к прикосновениям, соответствует клиническим потребностям конечных пользователей в простоте управления и четком отображении результатов измерений показателей жизнедеятельности.

- Возможность применения различных монтажных решений, как настенного крепления, так и на передвижных тележках.

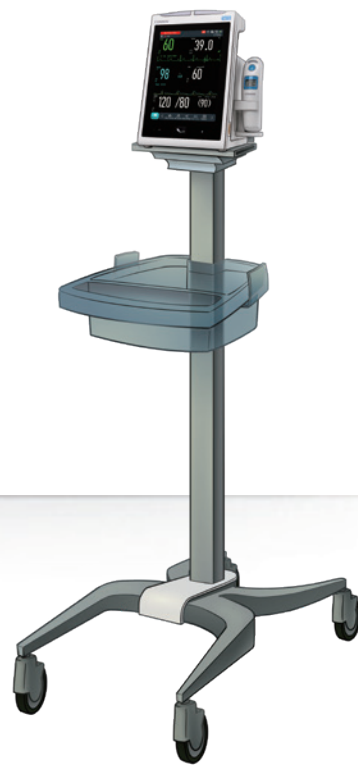

COMEN

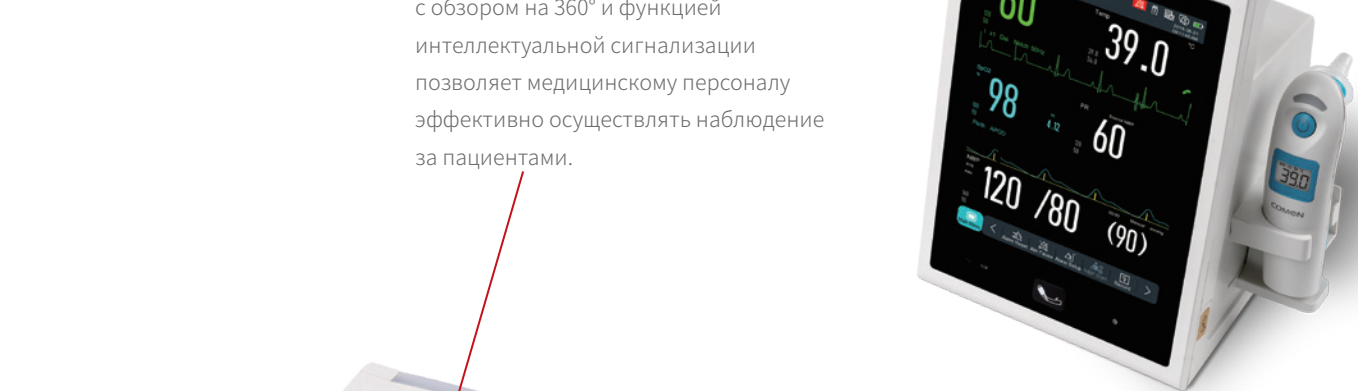

- Двойной световой сигнализатор с обзором на 360° и функцией интеллектуальной сигнализации позволяет медицинскому персоналу эффективно осуществлять наблюдение за пациентами.



- Опциональный термограф, ширина 50 мм.
- Поддержка скорости печати 25 мм/с, 50 мм/с.
- Поддержка печати 2-канальных кривых.

- Поддержка функции вызова медперсонала.

Система управления информацией



- Поддержка протокола HL7, который может быть легко интегрирован в информационную систему больницы для осуществления информационного взаимодействия.
- Центральную систему мониторинга можно подключить посредством проводного или беспроводного режима, что позволит обеспечить централизованное управление пациентами и тем самым оптимизировать нагрузку на медицинский персонал. Предоставление комплексного сетевого решения, позволяющего получить доступ к информации о пациентах и повысить эффективность работы в любое время и в любом месте.

Name	Monitor Time	Patient ID	Bed No.	Birth Date	Sex
[P]	2016-08-20 13:44:51				M
[P]	2016-08-20 20:04:05				M
[P]	2016-08-20 09:19:17				M
[P]	2016-08-20 12:07:29				M
[P]	2016-08-20 17:26:08				M
[P]	2016-08-20 28:13:07				M
[P]	2016-08-20 14:17:27				M
[P]	2016-08-18 11:00:29				M
[P]	2016-08-18 10:16:43				M
[P]	2016-08-18 00:00:29				M
[B] Baker John	2016-08-18 13:42:43				M
[B] Baker John	2016-08-18 15:26:26				M
[B] Baker John	2016-08-14 15:53:09				M
[B] Baker John	2016-08-15:52:57				M
[B] Baker John	2016-08-14 16:26:26				M
[B] Baker John	2016-08-14 17:41:21				M

Query View Delete Export ◀ ▶ ↕

- Система управления пациентами:
Комплексная система управления информацией о пациентах, позволяющая конечным пользователям запрашивать, просматривать, удалять и передавать медицинские записи.

- Система управления сигнализацией:
Настройки сигнализации всех параметров объединены в одном меню, а пороги сигнализации всех параметров можно установить совместно, что упрощает работу медицинского персонала.

+7 (812) 467 87 45
info@comen-shop.ru
comen-shop.ru


Оригинальный, минималистичный,
интеллектуальный и легкий

NC5 Монитор основных показателей

NC5 Монитор основных показателей

Применяется в амбулаторных, неотложных и общих отделениях. Для использования в качестве монитора выборочной проверки и прикроватного монитора в нем интегрированы измерения НИАД, SpO2, ЭКГ, ушной температуры. Он прост, выполнен со вкусом, компактен и легок, и представляет собой идеальное сочетание технологии и эстетики.

Практичный двойной режим, плавное переключение

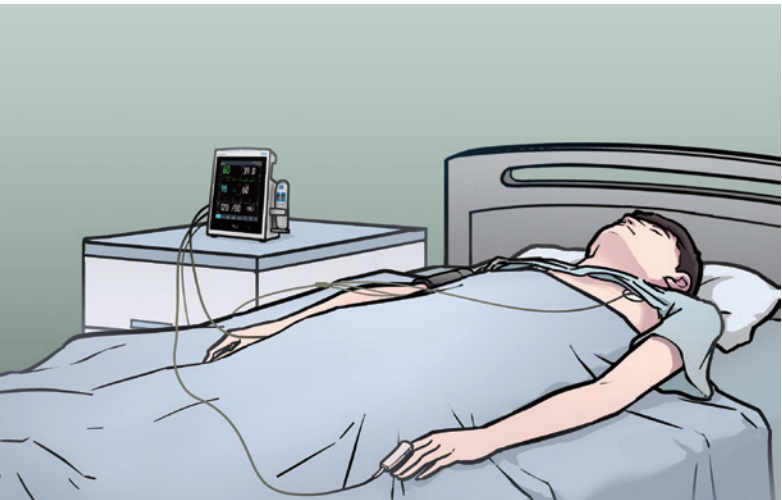


Режим выборочной проверки:

Применяется в амбулаторных и неотложных отделениях для быстрого измерения физиологических параметров. Система модифицированной оценки раннего предупреждения (MEWS) может быть использована в качестве эталона для диагностики и мониторинга состояния, что делает ее простой и эффективной.

Режим мониторинга:

Используется в качестве прикроватного монитора в общих отделениях для измерения физиологических параметров пациента (НИАД, SpO2, ЭКГ и т. д.) в режиме реального времени.

Система быстрого измерения ЭКГ

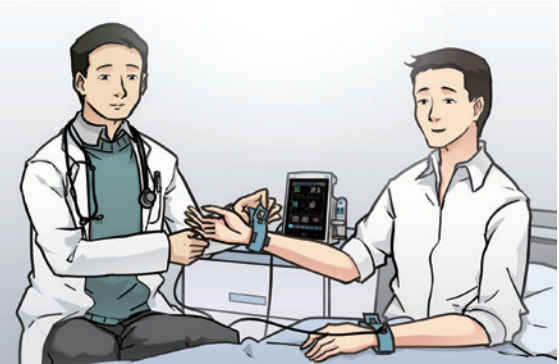


Специальная конструкция в соответствии с клиническими требованиями. Быстрое измерения ЭКГ с помощью специальных принадлежностей упрощает работу.




Большая и привлекающая внимание кнопка НИАД. Быстрое измерение артериального давления одним нажатием кнопки.



Бесконтактный инфракрасный ушной термометр. Отсутствие риска перекрестного заражения. Быстрота, стабильность и точность с длительностью измерения в **1-2 с.**

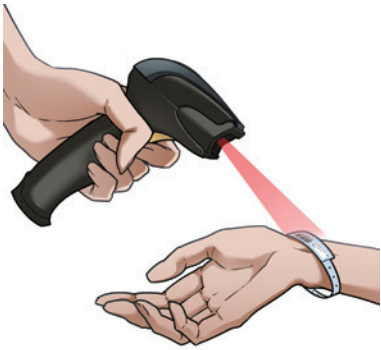

Сканер штрих-кода позволяет быстро вводить информацию о пациенте, поддерживает различные сканеры штрих-кодов, что позволяет приобрести их на месте.

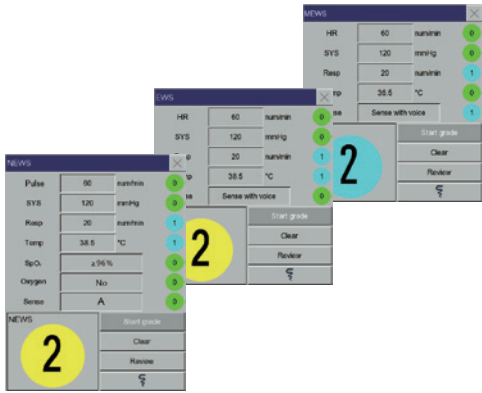

Усовершенствованная функция помощи в принятии клинических решений. Помощь в выявлении потенциально критических пациентов посредством системы многомерного оценивания.



Ручной режим ожидания активируется одним нажатием кнопки включения/выключения для простоты эксплуатации.